

セーフティー機構付き プレフィル用シリンジ
FULJECT™



Passive Type PAT. P

【医療機器認証番号】 225AGBZX00038000




■注射後、そのままの追加操作（強く押すだけ）で針を自動収納 & 自動再ロック

●ロック解除



使用開始

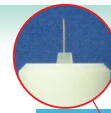

注射

●針自動収納
再ロック



注射後、廃棄

Active Type PAT. P D. PAT.

【医療機器認証番号】 225AGBZX00037000



■小型サイズ（一般的な1mLシリンジの1/2の大きさ）

●ロック解除



使用開始



注射

●針収納
再ロック



注射後、廃棄

特長

- 注射直前まで金属および接着剤との接触がなく、薬液の安定性を確保
- セーフティー&ロック機構（針刺し事故防止 再使用防止 安全な廃棄）
- 既存のプレフィルシリンジで採用実績のある原材料のみ使用
 - ・ バレル原料に環状ポリオレフィン (COP) を採用し、タンパク吸着を抑制(ガラスと比較して)
 - ・ ラミネートピストンの採用により、シリコーンフリー対応可能
- 用事溶解タイプにも対応可能