

# VF-Syringe

## (ガラス製プレフィル用シリンジ)

### 製品仕様

お客様のニーズに合わせて、各種仕様を設定しております。  
また、特別仕様などのご要望にも対応致します。

仕様	未洗浄	洗浄	シリコンコート	滅菌
A	✓			
B		✓		
C		✓	✓	
D		✓	✓	✓



#### 未洗浄

お客様にて洗浄工程から実施される場合の仕様となります。弊社では外観・寸法検査工程を経て出荷致します。

#### 洗浄

精製水にてバレルの内外面を洗浄して、クリーンな状態で包装、出荷致します。

#### シリコンコート

優れた定量性をバリデーションにより保証し、かつ詳細な工程検査によりコートの実績性を保証しております。また、コートと同時に発熱性物質の除去も兼ねてます。

#### 滅菌

エチレンオキシドガスにより滅菌処理致します。ガイドラインに基づく滅菌バリデーションの実施により無菌性を保証致します。

### 規格品寸法

#### ●スタンダードタイプ

製品名	容量(mL)	外径(mm)	内径(mm)	全長(mm)	形状適合基準
VF-1.0	1.0	8.15	6.35	64.0	ISO 11040-4
VF-2.25	2.25	10.85	8.65	65.5	
VF-5.0	5.0	14.45	11.85	79.4	
VF-A5	5.0	14.85	12.45	79.0	専用形状

※上記品種はルアーロックアダプターを装着することが可能です。

#### ●両頭針タイプ


製品名	容量(mL)	外径(mm)	内径(mm)	全長(mm)	形状適合基準
VF-ME2	2.0	10.85	8.65	68.3	専用形状

### 包装仕様

お客様のニーズに合わせて、2種類の基本包装仕様を設定しております。また、ご要望により専用包装仕様にも対応致します。

#### ●ロンドトレイ

洗浄されたロンドトレイに装填し、ステンレスパットで包装致します。

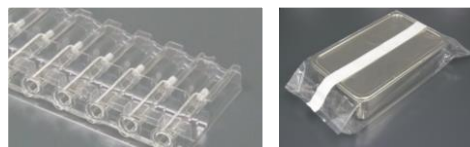

#### ●TasPack™

お客様にて開封後、即充填できるように設計された包装仕様です。

